




TOP SAFETY REPORT


ファインガード[®] 翼状針 (針刺し防止対策 オートレシーブ機能搭載)

1 安全な抜針から廃棄まで

Check 1 抜針の準備

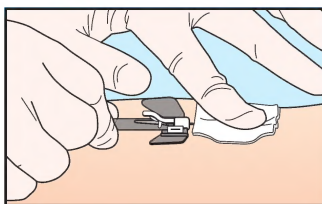


胴体を手さし指と親指でつまみ、安定させ、もう一方の手で抜針部位を消毒綿で軽く押さえます。

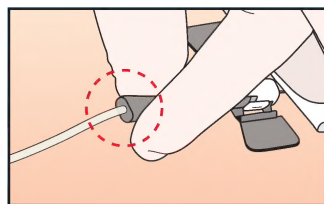


注) オートレシーブ機能が正しく作動するよう、胴体後ろのチューブに触らないでください。

Check 2 抜針

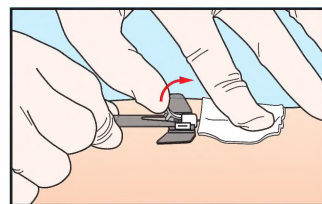


抜針部位を押さえている手の親指でレバーを引き上げて、オートレシーブ機能を作動させ、抜針と同時に素早く止血作業を行います。

Check 3 収納

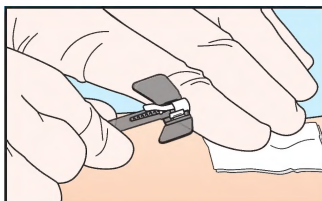


針が胴体内部に収納されたことを確認し、取り外します。

Check 4 針のロック

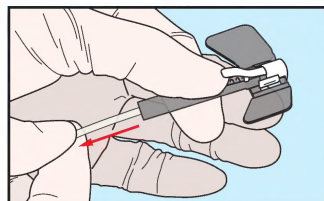

チューブを引き、収納した針をロックさせます。

Check 5 廃棄

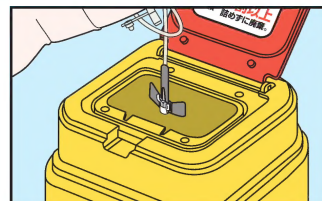


廃棄ボックスに、そのまま翼状針を廃棄します。

2 抜針時の主な注意点

Check 1 針が戻らない①


胴体後ろのチューブを巻いたり、触ったりしていませんか？

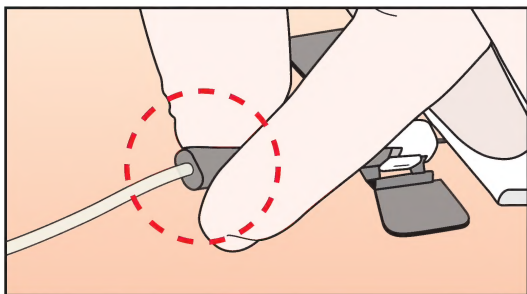

機能上、針が戻らない場合があるため、チューブを巻いたり、触ったりしないようにしてください。

Check 2 針が戻らない②

抜針部位を強く押さえていませんか？

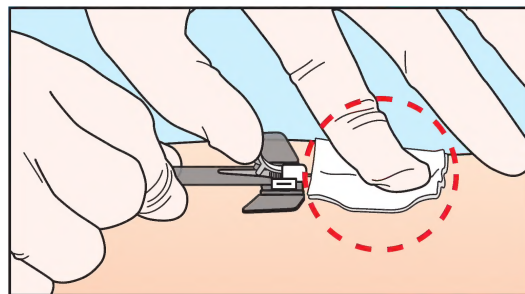

機能上、強く押さえると針が戻らない場合があるため、オートレシーブ機能を作動させる際は、指を軽く添える程度にしてください。



株式会社トップ 安全管理部
〒120-0035 東京都足立区千住中居町19番10号

使用の際には、必ず詳細を添付文書
及び取扱説明書にて確認してください。